

DOSIFICADORES PARA TERNEROS....



MODELO 4-LITROS



Dosificador Speedy Drencher

Dosificador para Terneros 3 Velocidades

completo 2.5L	211 180	\$15.995
completo 4L	213 734	\$19.995
sonda sola	211 178	\$8.495

Desarrollado a partir de la famosa botella alimentadora Shoof Speedy Feeder para terneros, este dosificador utiliza un diseño de sonda rígida que es estándar y muy conocido. Este entrega un práctico alimentador estomacal de flujo ajustable. El montaje de la sonda (sonda con tapa) está disponible por separado para adaptarse a su botella estándar Speedy Feeder. (No apto para Easy Feeder la tapa no tiene una entrada de aire).

NOTA: El dosificador lleno no debe ser transportado tomado por la sonda.




Tapa para Calostro

tapa c/u (Negra)	213 605	\$995
------------------	---------	-------

Esta tapa se ajusta a los dosificadores Speedy Drencher, Speedy Feeder o Easy Feeder. Su propósito es para el almacenamiento sin derrame de calostro en refrigerador o congeladora. No tiene conector para chupete o respiradero, de modo que la leche se encontrara sellada.



Sonda rígida

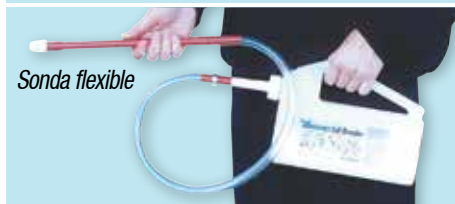

Sonda flexible

Dosificador Bovivet

completo sonda rígida	200 971	\$15.995
completo sonda flexible	200 973	\$21.995
sonda rígida repuesto	200 975	\$6.995
sonda flexible repuesto	200 972	\$12.995

Los dosificadores Bovivet están disponibles en dos modelos: con sonda rígida y con sonda flexible. El modelo de sonda rígida se puede utilizar con una sola mano, mientras que con la otra mano se sostiene la cabeza del ternero. El modelo de sonda flexible permite posicionar la sonda fácilmente sin que el movimiento del ternero sea un obstáculo. En ambos casos la sonda incorpora una tapa especialmente diseñada para evitar que se posicione incorrectamente en los pulmones. Capacidad del dosificador: 2 litros



Dosificador Oral

200 977	\$21.995
---------	----------

Nuestro dosificador oral incorpora una bolsa flexible con cierre Zip, y una agarradera en una de las esquinas. El cierre Zip permite un fácil llenado. La sonda flexible de 1.2m. de largo incorpora una parte de 40cm. que es rígida, con posición esofágica y presilla de Encendido/Apagado. Instrucciones de uso en la bolsa. 3 litros de capacidad, con graduaciones de a 500ml.

4 LITROS INMEDIATAMENTE

La última recomendación de los investigadores es sobre alimentar con cuatro litros de calostro de buena calidad, preferiblemente en una toma, dentro de las primeras 6 a 11 horas después del nacimiento*. Las crías nacen con poca inmunidad a las enfermedades. Seis horas después del nacimiento, la capacidad de absorción intestinal se reduce en un tercio. Después de 24 horas sólo puede absorber 11% de anticuerpos adquiridos en la misma. Muy poca protección adicional se logra en la alimentación posterior. La mejor manera de lograr esta ganancia es directamente en el estómago con nuestro de 4 Speedy Drencher de 4 litros. *Referencia . Australian Dairy Farmer 05 2012 p92.



Calostrómetro Kruuse

201 576	\$21.995
---------	----------

El calostrómetro Kruuse viene con un vaso para la muestra de leche. El densímetro es luego sumergido en la leche donde la densidad se marca en la escala. Un gráfico convierte la densidad marcada de la calidad del calostro. A menor densidad, menor calidad de la leche. Viene con manual de instrucciones.



Calostrómetro Test rápido

201 577	\$49.995
---------	----------

El calostrómetro - test rápido ofrece un dispositivo - tubo de succión - para hacer pruebas de forma rápida y sencilla, succionando la leche desde cualquier recipiente, y leyendo la densidad con su escala flotante en el interior. El dispositivo completo se suministra en una caja de plástico para mantenerlo protegido. Instrucciones incluidas.

CALOSTRO CONGELADO

Utilice el Calostrómetro para identificar una vaca o un cuarto con buen calostro. Retenga la leche en un balde de prueba, o en un Quaternmilk. Llene una mamadera para terneros, o un dosificador y congélela. Entibiela en el microondas cuando tenga un ternero guacho o en peligro de muerte. El calostro debe ser suministrado en las primeras horas de vida para ser efectivo.

CÓMO ALMACENAR LECHE CON CALOSTRO

Si piensa almacenar el calostro por unos días sin congelar, y luego pretende calentarlo, debe tratarlo de la siguiente manera:

1. Agregue un litro de solución de Peróxido de Hidrógeno 30% (disponible en veterinarias o farmacias) cada 100 litros de leche, al momento de almacenar.
2. No almacene leche con tratamiento de antibióticos o contaminada con sangre.
3. Revuelva dos veces por día.